

***Hico-Decubimat 375 2-kamrás, nagy cellás változó nyomású matraccal
a NORTON-féle közepes veszély megelőzésére,
valamint a SEILER féle I-II dekubitusz stádium kezelésére.***




A Hico-Decubimat 375 rendszer 2-kamrás, nagy cellás kialakítású változó nyomású matrac segítségével alakítja ki az optimális környezetet.


- ◆ 2-kamrás nagy cellás rendszer
CPR funkcióval és statikus fejszekcióval (3 cella).



- ◆ A cellák mindegyike cserélhető.
- ◆ Magas fekvési kényelmet biztosít a páciens számára a légáteresztő és bőrbarát bevonatnak köszönhetően.
- ◆ **A Hico-Decubimat 375 rendszer az alacsony és a NORTON-féle közepes veszély megelőzésére szolgál, valamint a SEILER féle I-II dekubitusz stádium kezelésére.**
- ◆ A Hico-Decubimat 375 rendszer **szállítási funkcióval** rendelkezik: a rendszer a matrac minden egyes celláját a megfelelő nyomásra állítja és így biztosítja a páciens számára a puha felületű fekvést. A kikapcsolás után a matracban lévő nyomás állandó marad, így a beteg szállíthatóvá válik az ágygal a matraccal és a kompresszorral együtt.
- ◆ Automatikus nyomás kontroll, **mikroprocesszoros vezérléssel.**
- ◆ **Kijelző**, melyről leolvasható a matrac és a kompresszor mindenkori állapota.

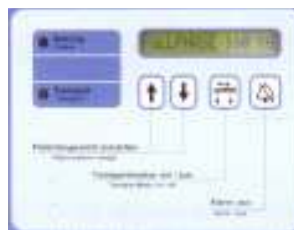

- ◆ **Baktérium szűrő**, mely biztosítja a hosszú élettartamot. A baktérium szűrő megvédi a rendszert a fertőzésektől és bármikor kicserélhető. Növeli a működési biztonságot és higiéniát.
- ◆ Alkalmazható súlyhatárok: **40-160 kg.**
- ◆ Könnyű kezelés és tisztítás.
- ◆ Csendes üzemmód.

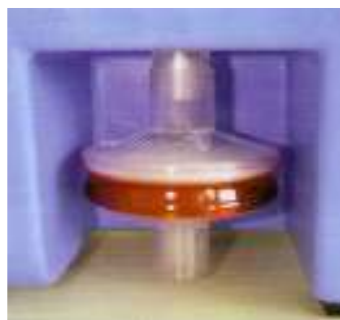

Műszaki adatok:

♣ **Kompresszor:**

- ♣ 230 V, 50-60 Hz
- ♣ Névleges fogyasztás : 30 W
- ♣ Ciklus idő: kb. 6 perc
- ♣ A kompresszor mérete: 400*350*150 mm
- ♣ Súly: kb. 6 kg.
- ♣ Hang kibocsátás: kb. 30 dBA

♣ **A matrac kialakítása:**

- 3 db statikus cella, 2-kamrás rendszer, CPR szeleppel
- Bevonat: bőrbarát, légáteresztő, vízhatlan, hajlékony, gépben mosható
- Súly: kb. 4,7 kg.
- Mérete működés közben: 200*90*13 cm